


# INSTRUCCIONES PARA USAR LA PRUEBA CASERA DE COVID-19

Solicite sus pruebas caseras de COVID-19 gratuitas a [www.covidtests.gov](http://www.covidtests.gov) o llamando al 1800-232-0233 TTY 1888-720-7489.

## Paso 1

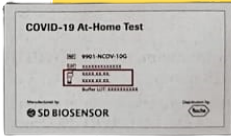

- Verifique que la prueba no esté expirada. De estarlo, favor de no utilizarla.
- Desinfecte la superficie sobre la que abrirá el kit de la prueba.
- Lávese las manos con agua y jabón antes de abrir el kit.

## Paso 2



- Abra la bolsa de aluminio 1 rasgándola a lo largo de la línea trazada.
- Retire los materiales de la prueba y colóquelos en una superficie plana.

## Paso 3




- Abra la bolsa de aluminio 2 y coloque los materiales sobre la superficie plana.
- Abra el sello del tubo con cuidado sin derramar el líquido.
- Coloque el tubo en el soporte del tubo. **Si se derrama algún líquido, no utilice el tubo.**

## Paso 4




- Retire el bastoncito de algodón del paquete.
- No toque el extremo blando con sus manos ni con otra cosa.

## Paso 5

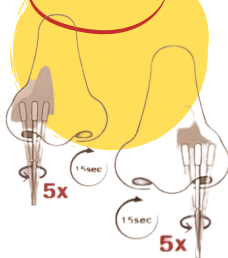

- Inserte con cuidado en la nariz, hasta el final, la parte del algodón del bastoncito (menos de una pulgada o hasta que sienta que le molesta).
- Gire el bastoncito lentamente, frotándolo con suavidad por el interior de una de las entradas de la nariz (5 vueltas).
- Retire el bastoncito suavemente.
- Luego haga lo mismo, con el mismo bastoncito de algodón, con la otra fosa nasal.

- Inserte el bastoncito de algodón dentro del tubo hasta que el algodón quede completamente dentro del líquido.
- Apriete el tubo en la parte inferior y manténgalo apretado. luego revuelva el bastoncito de algodón más de 10 veces (esto es para transferir el material biológico del bastón de algodón).

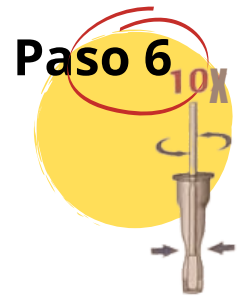



- Retire el bastoncito de algodón mientras aprieta los lados del tubo para extraer el líquido del mismo (si no se aprieta el tubo, se pueden obtener resultados incorrectos debido al exceso de en el bastoncito de algodón).

- Deseche el bastoncito de algodón y selle el tubo de forma segura con la tapa de la boquilla.



- Sostenga el tubo en posición vertical sobre el pozo de muestra.
- Deje caer 4 gotas en el pocillo de la muestra.
- No aplique el líquido en la ventana de resultados rectangular.

- Espere 20 minutos por el resultado. No leer el resultado luego de 30 minutos.
- No mueva la muestra durante el periodo de espera.
- Cuando tenga el resultado, favor de desechar la muestra en el zafacón.

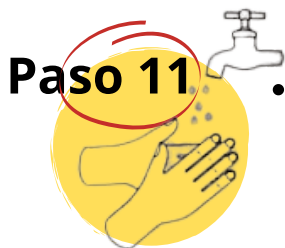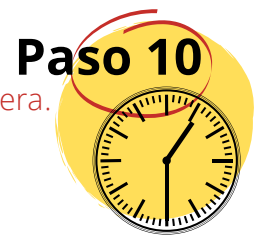

- Lávese las manos con agua y jabón o vuelva a aplicarse el desinfectante de manos.

**Si experimenta algún síntoma como fiebre, tos, cansancio, pérdida del gusto o del olfato, hágase una prueba en casa para obtener resultados rápidos. No espere. Si se realizó una prueba casera de COVID-19, puede registrar el resultado obtenido escaneando el código QR. Para información adicional puedes acceder a [salud.pr.gov/covid-19](http://salud.pr.gov/covid-19)**

